

# Acessórios



C02-1005-481

## Suporte de células de transmissão

Para usar para colocar células de transmissão na porta de transmissão.



13-8573-40  
04-4592-00  
13-8573-20

## Células óticas

Células de vidro óticamente claro com extensão fixa de trajeto de 10 mm, 20 mm ou 50 mm. Volume de amostra 20 ml, 40 ml e 100 ml respectivamente. Para uso com a bandeja coletora de derrame e suporte de células.



D02-1011-568

## Bandeja coletora de derrame de transmissão e suporte de células

Permite a medida de transmissão de líquidos usando célula de transmissão retangular.



D02-1011-550

## Suporte de transmissão para frascos de vidro redondos

Fornecer um suporte de transmissão para frascos de vidro redondos de 24 mm ID (27 mm - 30 mm OD) com volumes de 20 ml, 40 ml ou 60 ml dependendo do tamanho.




D02-1009-960

## Suporte de células de fluxo contínuo

Fornecer um suporte de células para células de transmissão de fluxo contínuo de 2 mm, 10 mm, ou 50 mm para a célula de fluxo central na porta de transmissão.

- Acessórios e dispositivos de manuseio de amostras disponíveis para toda aplicação industrial

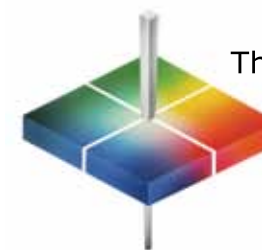

The world's true measure of color

# HunterLab

## ColorQuest® XT



meça

a cor  
como seu  
olho a vê





O ColorQuest® XT é um espectrofotômetro de medida de transmissão completamente independente que oferece precisão e exatidão com um grande valor. Projetado para operar de maneira ótima em uma coifa, o ColorQuest® XT mede com precisão produtos derivados do petróleo usando as escalas de cor Saybolt e ASTM. Ele tem as escalas de cor PtCo/Hazen e Gardner integradas, bem como as escalas ASBC e EBC para destilados e ADMI para corantes de água residual. Também são fornecidas escalas e índices adicionais, como APHA, pois o ColorQuest® XT é uma solução de medida de transmissão muito popular nas indústrias alimentícia, farmacêutica, plástica e química.

## DESIGNED FOR

SOLVENTS

PELLETS

Oils

lenses

Transparent Liquids

resins

petroleum waxes

GLASS

laminates

perfumes

acids

WASTEWATER

heating oils

gasoline

varnishes

transparent preforms

BEER

lubricating oils

Transparent Bottles

FILMS

white spirits

dyestuff

Kerosene

## Estável


Sob seu exterior suave fica uma montagem eletrônica, robustamente construída em excesso de especificação sobre uma plataforma ótica rígida, garantindo anos de serviço preciso e estável.

- Grampeadores inoxidáveis de grau de aviação
- Plataforma sólida com 1/2", eliminando fator flexível
- Eletrônicas robustas



## Versátil

- Projetado para medir amostras líquidas e sólidas transparentes
- Compartimento de medida de transmissão de grandes dimensões líder da indústria, completamente aberto de três lados
- Inclui escalas de cores e índices usados amplamente para aplicações de transmissão

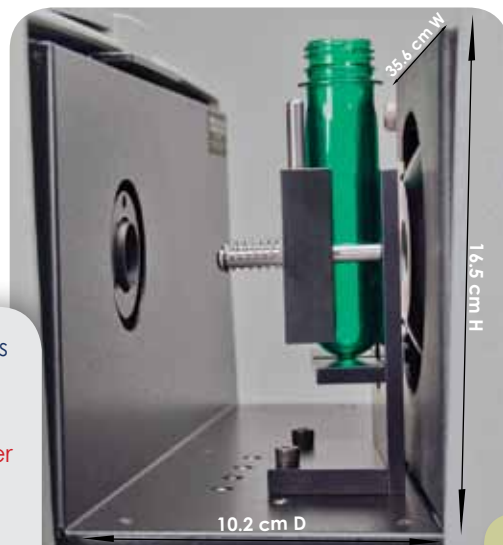

## Excelente valor

O ColorQuest® XT oferece um excelente valor, proporcionando uma operação robusta, praticidade e baixo custo de posse. A configuração ótica eficiente oferece alto desempenho com design de um verdadeiro monocromador. Uma lâmpada de xenônio de longa vida fornece iluminação de alta energia ligada imediatamente para medidas precisas de 400 nm a 700 nm. O software prático integrado rico em funções com interface de usuário em touchscreen tem funcionalidade avançada para amostras mais exigentes, porém, é simples e direto para análise de rotina.



- Geometria esférica permite medidas de transmissão precisas em material dispersante e soluções turvas
- Fornecido filtro de verificação de calibragem de comprimento da onda
- Elimina subjetividade e maximiza repetibilidade
- Modos de transmissão regulares e totais

## Características

- Mede o alcance do comprimento da onda espectral 400 nm - 700 nm, em intervalos de 10 nm
- Processador on-board e software QC. Sem necessidade de PC
- Grande compartimento de transmissão aberto de três lados
- Ótima operação em coifa
- Operação prática com touchscreen
- Múltiplas escalas de cor e índices fornecidas
- Pode ser usado com um PC e com o Software EasyMatch® QC da HunterLab



## A vantagem HunterLab

O ColorQuest® XT tem o apoio de mais de 60 anos de inovação da qualidade e experiência da HunterLab, a especialista em qualidade de cor mais confiada do mundo. Com uma reputação sem igual por oferecer a solução certa para qualquer desafio, a HunterLab adapta produtos e tecnologias para cada necessidade de medida de cor e orçamento, oferecendo a mais ampla variedade de soluções de medida de cor na indústria.

Para mais informações, visite [www.hunterlab.com](http://www.hunterlab.com) ou contate seu representante HunterLab local.

