

Acessórios



04-7209-00

Copo de amostra de vidro: 64 mm (2,5 pol.)

Vidro ópticamente claro para apresentação simples de líquidos, grânulos e pellets.

02-4579-00

Conjunto de anel e disco

Para uso no copo da amostra para apresentação de amostra líquidos, pós, grânulos e pellets.

04-4000-00

Tampa opaca do copo de amostra

Proporciona desvio de luz para excluir a interferência de luz externa no copo de amostra.



04-6622-00

Ajuste para o copo de amostra

64 mm (2,5 in) Projetada para segurar e posicionar o copo de amostra de vidro perfeitamente para medir pós, grânulos, pellets, pasta e líquidos com precisão.

04-6623-10

32 mm (1.25 pol.) de diâmetro

04-6623-09

25 mm (1 pol.) de diâmetro

04-6623-08

19 mm (0.75 pol.) de diâmetro

04-6623-05

13 mm (0.50 pol.) de diâmetro

Enable you to adjust the sample measurement area.



A13-1014-294

Teclado Flexível USB

Teclado de 88 caracteres permite ao usuário inserir IDs diretamente no ColorFlex® EZ.

A13-1014-254

Leitor de código de barras USB

O leitor de código de barras escaneia IDs de produtos diretamente para o ColorFlex® EZ. Detectado automaticamente na porta USB.

A13-1014-259

Impressora USB


A impressora USB permite fazer cópia impressa das medidas. Requer um cabo USB padrão vendido separadamente. Usa papel de impressora térmica, vendido separadamente.



L02-1014-608

Maleta rígida, ColorFlex® EZ

Estojo de transporte rígido para ColorFlex® EZ.

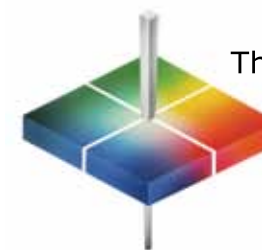

The world's true measure of color

HunterLab

ColorFlex® EZ Coffee



meça

a cor
como seu
olho a vê



Espectrofotômetro ColorFlex® EZ Coffee

Adição mais recente à família de produtos ColorFlex® EZ, o ColorFlex® EZ Coffee construído especificamente para atender e exceder suas necessidades de medida da cor do café torrado moído. Todo ColorFlex® EZ Coffee vem com 60 anos de experiência e inovação em controle de qualidade pela cor da HunterLab, a verdadeira medida de cor do mundo.

Usando geometria ótica de 45°/0°, a única tecnologia de medida de cor comprovada para medir a cor do modo como o olho humano a vê, o prático ColorFlex® EZ Coffee é especificamente projetado para medir com precisão a cor do café torrado moído, incluindo liofilizado e solúvel. O ColorFlex® EZ Coffee fornece os dados de medida necessários para garantir qualidade de produção lote a lote.

As escalas de cor do café fornecidas no firmware incluem:

- Índice de Cor do Café da HunterLab (HCCI)
- Número SCAA
- Classificação de torra SCAA

A cor do café é usada principalmente para avaliar o grau de torra. Cada torra tem características diferentes de sabor para o mesmo grupo original de grãos de café.




COFFEE ROAST	D65/10°
HCCI	10.7
SCAA	55
MEDIUM	
NEXT MAIN MENU SAVE/PRINT	

COFFEE ROAST	D65/10°
HCCI	8.8
SCAA	48
Moderately Dark	
NEXT MAIN MENU SAVE/PRINT	

COFFEE ROAST	D65/10°
HCCI	3.5
SCAA	36
Dark	
NEXT MAIN MENU SAVE/PRINT	

ColorFlex® EZ Coffee da HunterLab torna fácil definir o grau de torra.

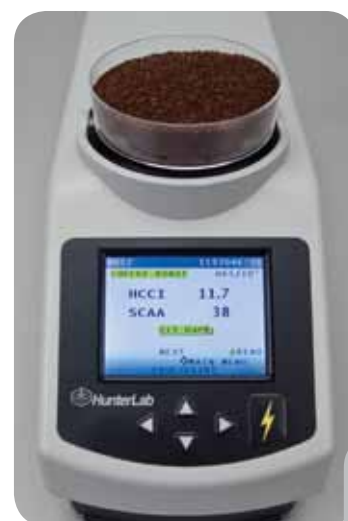

Novidade nesta versão:

Outros índices de dados colorimétricos e espectrais, incluindo a cor Hunter L,a,b e a cor CIE L*a*b*, são também fornecidos no firmware, permitindo também utilizar seu ColorFlex® EZ Coffee para medir a cor refletida de uma ampla variedade de amostras não café - líquidos, semissólidos, pós e sólidos. Dentro de sua maleta impermeável de design personalizado estará tudo que você precisa para começar a medir valores de cor de café imediatamente.

Every ColorFlex® EZ Coffee instrument is ready to immediately start measuring coffee color values, and includes:

- Instrumento ColorFlex® EZ Coffee
- Conjunto completo de blocos de calibragem e diagnóstico
- Bloco PQ Coffee
- 1 pacote de pratos plásticos de amostra de café

... todos com o apoio do melhor suporte ao cliente na indústria.

Com escritórios estrategicamente localizados em 79 países, a HunterLab oferece vendas locais e suporte em escala global.

Bloco de café para Qualificação de Desempenho



A vantagem HunterLab

O ColorFlex® EZ tem o apoio de mais de 60 anos de inovação de qualidade e experiência da HunterLab, a especialista em qualidade de cor mais confiada do mundo. Com uma reputação sem igual por oferecer a solução certa para qualquer desafio, a HunterLab adapta produtos e tecnologias para cada necessidade de medida de cor e orçamento, oferecendo a mais ampla variedade de soluções de medida de cor na indústria.

É fácil assim!
É ColorFlex® EZ

Para mais informações, visite www.hunterlab.com ou contate seu representante HunterLab local.

Sumatra



Colombiano



Havaiano



Planícies Africanas

